



V28





T.D.S. Ingegneria Clinica

Perete (CE) Tel 0815036695 Fax 0818125127
www.tds-med.com email info@tds-med.com

Data Verifica

MAR 2007

Verifica NORMA CEI

☒ **62-5**

☐ **66-5**

Periodicità

☒ Annuale **2008**

☐ Biennale **2009**

N° Inventario TDS SBE 03

Ambiente
e lavoro

ERGON

**VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5**

Apparecchiatura N° **03**

2020 - SCAD.

2022 - SCAD.

2024 - SCAD.

28/05 2022

20/07

LUOLIO

2026 - SCAD.

2028 - SCAD.

2030 - SCAD.

SEMPRE

T.D.S. Ingegneria Clinica

Parete (CE) Tel 0815036695 Fax 0818125127
www.tds-med.com email info@tds-med.com

Data Verifica		MAR	2007
Verifica NORMA CEI		Periodicità	
☒	62-5	☒ Annuale	2008
☐	66-5	☐ Biennale	2009

N° Inventario TDS SBE 03

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5
Apparecchiatura N° 03

2020 - SCAD.	2022 - SCAD.	2024 - SCAD.
28/05/2022	20/07	20/07
2026 - SCAD.	2028 - SCAD.	2030 - SCAD.
SEMPRE		



INDUSTRIA SOLARIUM
ED ATTREZZATURE
PER L'ESTETICA



Apparecchio UV per trattamento pelle

Modello: **MATRIX V28**

Codice: **PFIV28/A1**

Matricola: **400525**

Anno di costruzione: **2004**

**MADE
IN
ITALY**

UV tipo: corpo **2** viso **2** corpo e viso **2**

Tensione:
3F+N~ 400V
50 / 60 Hz

Potenza nominale:
21500W
0,9 < COS ϕ < 1

Ciclo di lavoro:
30 min ON
04 min OFF

APPARECCHIATURA DI CLASSE 1.
DEVE ESSERE SEMPRE A TERRA IN
MODO PERMANENTE ED AFFIDABILE.





Certificato di emissione raggi **Ray emission certificate** **Certificat d'émission des rayons** **Bescheinigung der Strahlen - Abgabe** **Certificado de emision de rayos**



The tanning equipment emits U.V. rays types:

L'apparecchiatura abbronzante emette raggi U.V. del tipo:

L'appareil de bronzage émet de rayons U.V. de type:

Das Braunungsgerät gibt U.V. - Strahlen folgeden Typ ab:

El aparato bronceador emite rayos U.V. de types:

Sunbeds and tanning booth - Letti o cabine
 Lits ou cabines - Betten oder Kabinen - Camillas o
 cabinas - Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara

Mod. **MATRIX V28 A**

N. **400525**

Date **05/06/2012**

Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara

UVA W/m² 0,1929
 UVB W/m² 0,0936
 UVA+B W/m² 0,2927
 UV Type: 2

Hands - Mani - Mains - Hände - Manos

UVA W/m²
 UVB W/m²
 UVA+B W/m²
 UV Type: -

Body - Corpo - Corps - Körper - Cuerpo

UVA W/m² 0,0967
 UVB W/m² 0,1664
 UVA+B W/m² 0,2684
 UV Type: 2

Total - Totale - Total - Gesamt - Todo

UVA W/m² 0,1928
 UVB W/m² 0,1052
 UVA+B W/m² 0,2980
 UV Type: 2

I.SO ITALIA s.r.l.

Bukin Falco

Technical Department/Direzione Tecnica

I.S.O ITALIA s.r.l.

[Signature]

General Management/Direzione Generale

Please note: the values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27.
 By UVA, we mean effective radiation between 320-400 nm.
 By UVB, we mean effective radiation between 250-320 nm.

Nota: i valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27.
 Per UVA si intende la radiazione efficace tra 320-400 nm.
 Per UVB si intende la radiazione efficace tra 250-320 nm.

Note: les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27.
 Par UVA, l'on entend la radiation efficace entre 320-400 nm.
 Par UVB, l'on entend la radiation efficace entre 250-320 nm.

Anmerkung: die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27 formuliert wird.
 Mit UVA versteht man die effektive Strahlung zwischen 320-400 nm.
 Mit UVB versteht man die effektive Strahlung zwischen 250-320 nm.

Nota: los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27.
 Para rayos UVA se entiende la radiación eficaz entre 320-400 nm.
 Para rayos UVB se entiende la radiación eficaz entre 250-320 nm.



Più sicuro del sole

INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA

I.S.O Italia s.r.l. • Via G. di Vittorio, 30 • 30029 S. STINO DI LIVENZA (VE) • ITALY
 Tel. (0039) 0421 311700 r.a. • Fax (0039) 0421 311702 • e-mail: contact@isoitalia.com • www.isoitalia.com

NB. Il presente documento ha validità solamente se
 accompagnato dalla dichiarazione di adeguamento debitamente compilata

MPI 17013-3



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

QUESTA APPARECCHIATURA ABBRONZANTE

MATRICOLA : 400525

MARCA I.SO ITALIA MODELLO: MATRIX V28

È CONFORME PER I VALORI DI IRRADIANZA ALLA NORMA

CEI EN 60335-2-27: 2010

LA SUA IRRADIANZA EFFICACE, PERTANTO,

NON SUPERA IL LIMITE DI 0.3 W/M^2 .

Il costruttore ISO Italia s.r.l.

Via G di Vittorio, 30

30029 Santo Stino di Livenza (Ve)

P.I. 02362040277 - CF00972530232

Tel. 0421 311700 - Fax 0421 311702

Il responsabile tecnico

Giugno 2012




Ray emission certificate

We certify that this U.V.A. equipment emits U.V. rays:

Measurements are made in the ISO Italia test laboratories. Ambient conditions may significantly modify output data ($\pm 10\%$). Any differences in output data between similar models are due to the hand production of some components. The data given in this present document refer to the apparatus in its original condition, and will no longer be valid in the case of tampering or replacement with components not supplied by ISO Italia.

The values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27

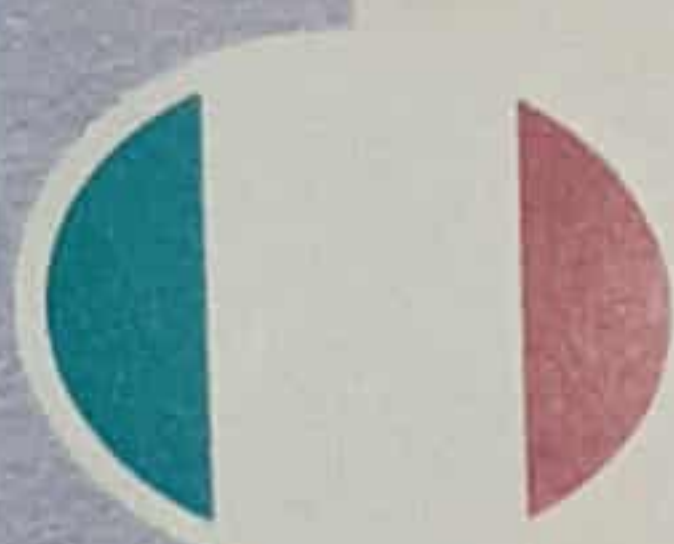


Certificato di emissione raggi

Attestiamo che questa apparecchiatura emette raggi U.V.:

Le misurazioni sono effettuate nei laboratori di prova della ISO Italia con apparecchiature omologate. Condizioni ambientali diverse modificano sensibilmente i dati rilevati ($\pm 10\%$). Eventuali differenze nella rilevazione dei dati di modelli simili sono dovute alla produzione artigianale di alcuni componenti. I dati contenuti nel presente documento si riferiscono all'apparecchiatura nelle sue condizioni originali, e perdono validità in caso di manomissioni e sostituzioni con componenti non originali.

I valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27

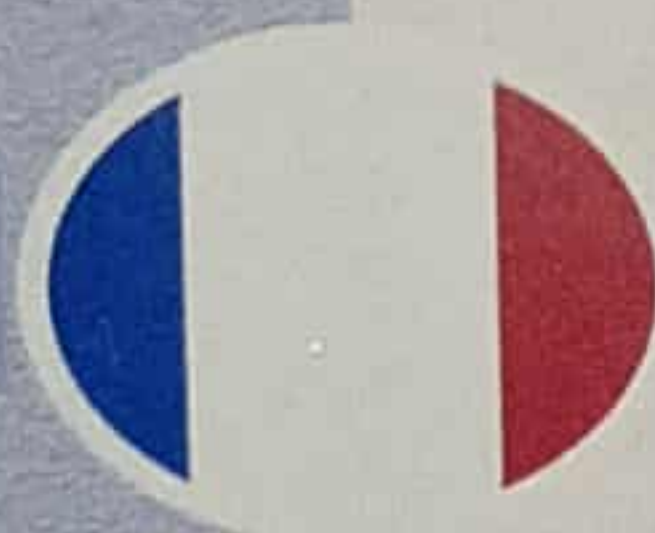

Certificat d'émission des rayons

Nous certifions que cet appareil à rayons U.V.A. émet des rayons U.V.:

Les mesures sont effectuées dans les laboratoires d'essai de ISO Italia. Les conditions environnementales peuvent modifier sensiblement les données relevées ($\pm 10\%$). Les éventuelles différences dans le relevé des données de modèles similaires sont dues à la production artisanale de certains éléments. Les données contenues dans le document présent se réfèrent à l'appareillage dans ses conditions originales; elles perdent toute validité en cas de modifications et substitutions avec des éléments ne présentant pas la marque ISO Italia.

Les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27



Bescheinigung der strahlen - abgabe

Es wird bescheinigt, daß dieser U.V.A. Strahlengerät UV-Strahlen abgibt:

Die Messungen werden in den Prüflabors der ISO Italia durchgeführt. Umweltbedingungen modifizieren die erhobenen Daten spürbar ($\pm 10\%$). Eventuelle Abweichungen in den Datenerhebungen von gleichen Modellen sind der handwerklichen Produktion einiger Komponenten geschuldet. Die Daten des vorliegenden Dokumentes beziehen sich auf die Apparatur im Originalzustand; sie verlieren ihre Gültigkeit im Fall von Mißbrauch und Austausch von Elementen mit solchen, die kein ISO Italia-Siegel haben.

Die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27



Certificado de emission de rayos

Se atestigua que este aparato de radiaciones U.V.A. emite radiaciones U.V.:

La medición se efectúa en los laboratorios de pruebas de ISO Italia. Las condiciones ambientales modifican sensibilmente los datos registrados ($\pm 10\%$). Las eventuales diferencias al registrar los datos de modelos semejantes se deben a la producción artesanal de algunos componentes. Los datos que el presente documento contiene se refieren al aparato en sus condiciones originales, pierden validez si se maneja indebidamente o se substituyen partes del mismo con elementos que tengan un sello diverso del de ISO Italia.

Los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27



MPI 17045

Regole per una Corretta Seduta Abbronzante

Le radiazioni ultraviolette del sole o di un apparecchio abbronzante possono danneggiare la pelle e gli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni in relazione alla sensibilità della pelle dell'individuo. Un'esposizione eccessiva, pertanto, può portare a scottature della pelle. Le esposizioni alle radiazioni del sole o di un apparecchio abbronzante, ripetute eccessivamente, possono aumentare il rischio di neoplasie ed invecchiamento prematuro della pelle. Gli occhi non protetti possono subire infiammazioni.

Per la tranquillità di effettuare sedute abbronzanti senza incorrere in rischi particolari sono da tenere seriamente in considerazione le seguenti precauzioni ed indicazioni:

- **Rispettare scrupolosamente i tempi di esposizione** stabiliti dal personale specializzato del centro.
- Si consiglia di **alternare almeno un giorno a una seduta e l'altra** (è consigliato esporsi non più di due volte alla settimana) rispettando le indicazioni del personale specializzato del centro.
- Usare sempre gli appositi **occhialini di protezione in dotazione**. In ogni caso **non sottoporsi assolutamente al trattamento abbronzante ad occhi aperti o con lenti a contatto**.
- Prima di ogni esposizione **la pelle deve essere ben pulita, senza trucco, prodotti cosmetici, profumi o deodoranti**. Dopo la seduta si consiglia una crema idratante dopo sole.
- È sconsigliato l'utilizzo del solarium a clienti che effettuano **trattamenti dermoestetici e trattamenti depilanti al laser**.
- L'uso non è consigliato a soggetti con età inferiore ai 16 anni.
- Durante una terapia con **farmaci particolari**, quali ad esempio, antibiotici od antinfiammatori, si consiglia la sospensione delle sedute abbronzanti, al fine di evitare reazioni di sensibilizzazione generate dall'uso dei medicinali. **Se vi è una cura medica in corso attendere il termine**. In ogni caso si consiglia di consultare il proprio medico curante. In caso di **gravidanza consultare il medico**. Si sconsiglia fortemente l'uso del solarium in caso di gravidanza.
- Richiedere e pretendere dal personale addetto la consultazione e la conoscenza dell'apposito manuale d'uso al seguito di ogni attrezzatura ISO ITALIA, perchè nessun risarcimento e/o responsabilità può essere riconducibile alla ISO ITALIA per una non corretta utilizzazione e/o manutenzione delle attrezzature dalla stessa prodotte.
- Usando il solarium nei tempi e nei modi prescritti si può ottenere un'ottima abbronzatura e mantenerla per lungo tempo, sia a breve che a lunga scadenza. Evitare gli eccessi: ricordarsi che **il solarium ha sul corpo umano gli stessi effetti del sole**: poco alla volta fa bene, troppo può far male.
- Per una abbronzatura omogenea evitare le posizioni fisse o le attitudini statiche: è consigliato di muoversi e spostarsi affinché l'angolo di ricezione dei raggi non sia sempre identico e i tempi di esposizione siano uniformemente distribuiti su tutto il corpo.
- L'abbronzatura potrà risultare non perfettamente uniforme su soggetti con problemi di circolazione del sangue o che effettuano esposizioni durante il ciclo mestruale.
- **Altri effetti del solarium**: miglioramento del trattamento di affezioni cutanee, acne, impurità della pelle, psoriasi (in medicina è usato nella PUVA-terapia), funghi della pelle, reumatismi, artriti, artrosi, pulizia dell'epidermide, aumento dello spessore dell'epidermide, aumento della resistenza alle malattie infettive e da raffreddamento, aumento della formazione della vitamina D nel sangue (funzione antirachitica), tonificazione muscolare, relax psicofisico.
- **NON USARE L'APPARECCHIO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEI FILTRI (LUCE BIANCA PROVENIENTE DALLE LAMPADE) E DI DIFETTI DEI TEMPI DEL CONTROLLO DEI TEMPI DI ESPOSIZIONE.**
- Si consiglia visita dermatologica per determinazione fototipo.



PIÙ SICURO
DEL SOLE

IMPRESA SOLARIUM 89
ATTREZZATURE PER L'ESTETICA

130 Italia Srl - via G. d'Annunzio, 52 - 36029 - S. LEO DI LIVENZA (VI) - ITALY
Tel. +39 0421 311781 - Fax +39 0421 311782 - e-mail: comunicazione@isoitalia.com



www.isoitalia.com



Scheda solarium

MATRIX V28



CABINA ABBRONZANTE ALTA PRESSIONE

MATRICOLA 400525





Scheda solarium

MATRIX V28





CABINA ABBRONZANTE ALTA PRESSIONE

MATRICOLA 400525





V28

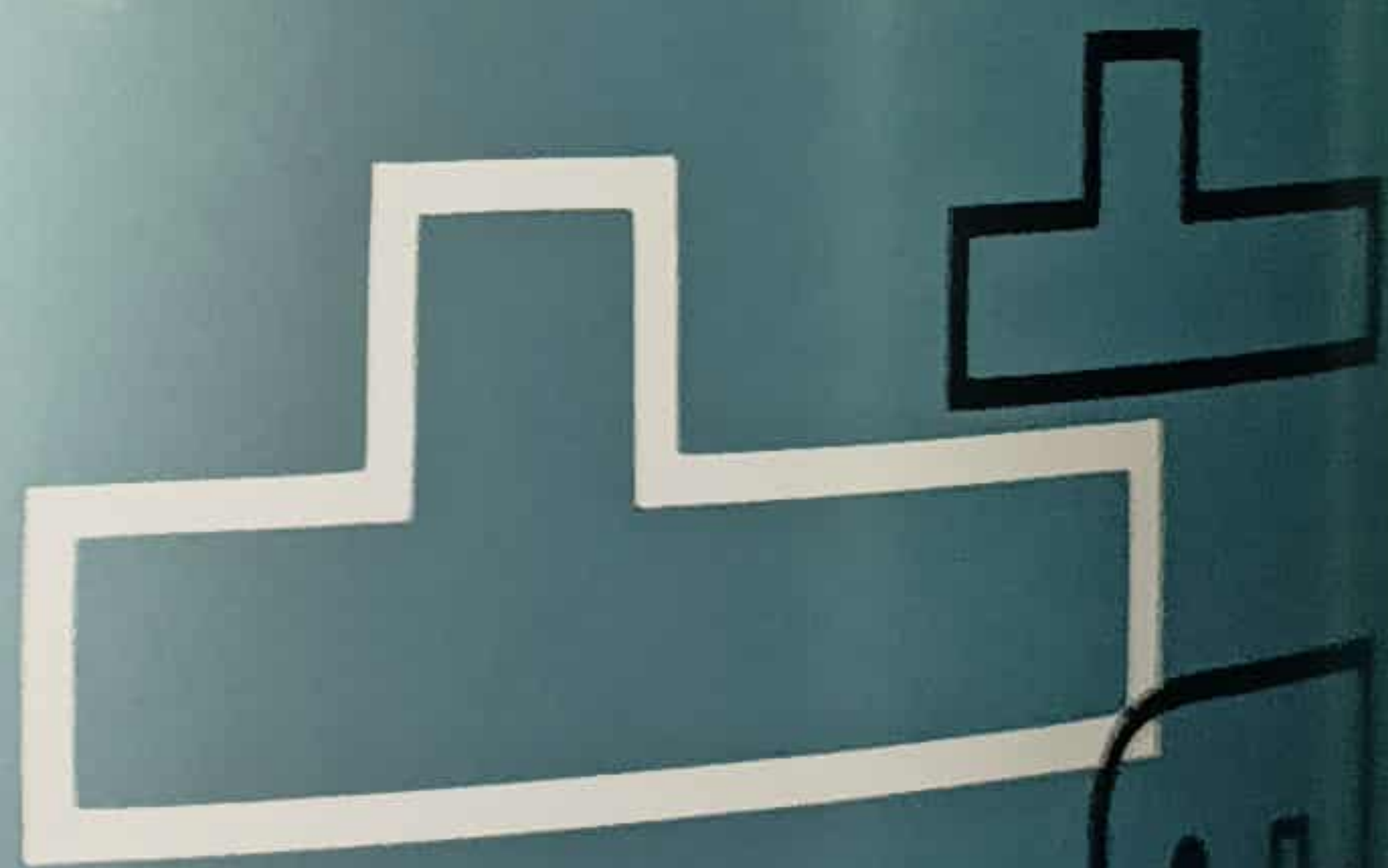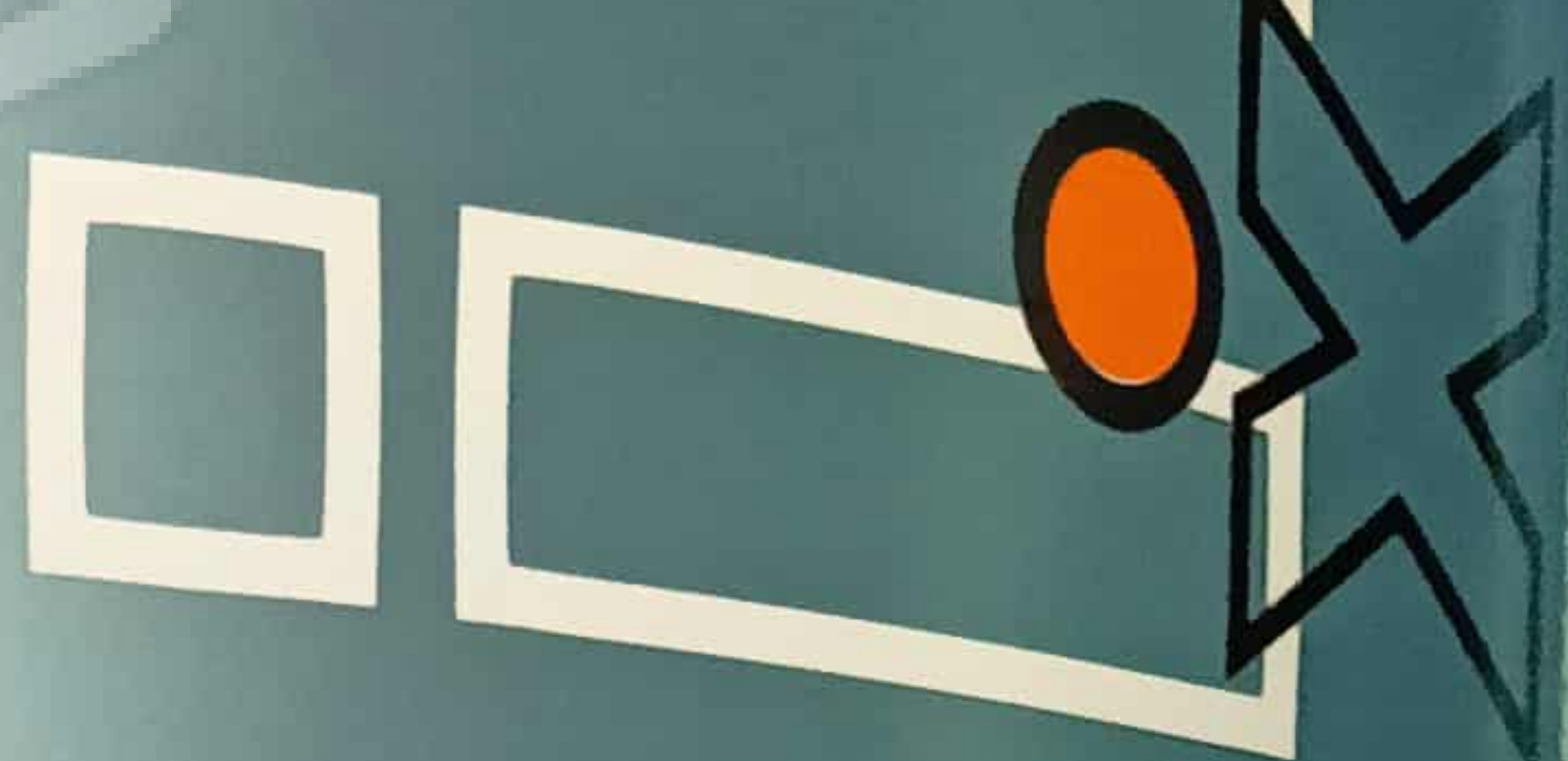

V28

Tel 0815036695 Fax 0818125127
www.tds-med.com email info@tds-med.com

Data Verifica

Verifica NORMA CEI

MAR

2007




62-5




66-5

Periodicità

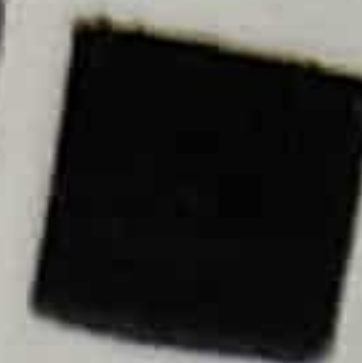

Annuale

2008

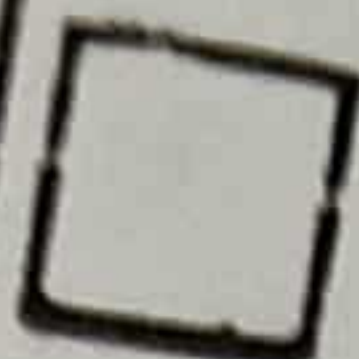

Biennale

2009

N° Inventario TDS

SBE 07



VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5

Apparecchiatura N° 07

2020 - SCAD.

2022 - SCAD.

2024 - SCAD.

25/05-2022

20/07

LUGLIO

2026 - SCAD.

2028 - SCAD.

2030 - SCAD.

SETTEMBRE



INDUSTRIA SOLARIUM
ED ATTREZZATURE
PER L'ESTETICA

MADE IN

ITALY

MODELLO **MATRIX**

CODICE **V28/A**

TIPO UV CORPO: **2** VISO: **2**

TIPO UV CORPO **E** VISO: **2**



APPARECCHIO UV PER
TRATTAMENTO PELLE

400V 3F+N~

50 / 60 Hz

POTENZA NOMINALE

21500W

$0,9 < \cos \varphi < 1$

CICLO DI LAVORO

60 min ON

04 min OFF

MATRICOLA N°

100713

ANNO DI
COSTRUZIONE

2002

APPARECCHIATURA DI CLASSE 1 DEVE ESSERE SEMPRE
A TERRA IN MODO PERMANENTE ED AFFIDABILE





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

QUESTA APPARECCHIATURA ABBRONZANTE

MATRICOLA : 100713

MARCA I.S.O. ITALIA MODELLO: MATRIX V28

È CONFORME PER I VALORI DI IRRADIANZA ALLA NORMA

CEI EN 60335-2-27: 2010

LA SUA IRRADIANZA EFFICACE, PERTANTO,

NON SUPERA IL LIMITE DI 0.3 W/M^2 .

Il costruttore I.S.O. Italia s.r.l.
Via G di Vittorio, 30
30029 Santo Stino di Livenza (Ve)
P.I. 02362040277 - CF00972530232
Tel. 0421 311700 - Fax 0421 311702

Il responsabile tecnico

Giugno 2012



Ray emission certificate

We certify that this U.V.A. equipment emits U.V. rays:

Measurements are made in the ISO Italia test laboratories. Ambient conditions may significantly modify output data ($\pm 10\%$). Any differences in output data between similar models are due to the hand production of some components. The data given in the present document refer to the apparatus in its original condition, and will no longer be valid in the case of tampering or replacement with components not supplied by ISO Italia.

The values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27




Certificato di emissione raggi

Attestiamo che questa apparecchiatura emette raggi U.V.:

Le misure sono effettuate nei laboratori di prova della ISO Italia con apparecchiature omologate. Condizioni ambientali diverse modificano sensibilmente i dati rilevati ($\pm 10\%$). Eventuali differenze nella rilevazione dei dati di modelli simili sono dovute alla produzione artigianale di alcuni componenti. I dati contenuti nel presente documento si riferiscono all'apparecchiatura nelle sue condizioni originali, e perdono validità in caso di manomissioni e sostituzioni dei componenti non originali.

I valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27

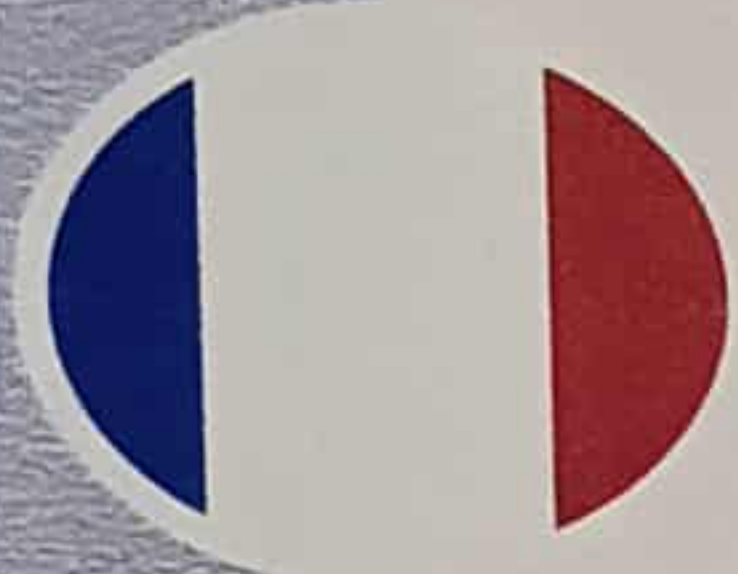

Certificat d'émission des rayons

Nous certifions que cet appareil à rayons U.V.A. émet des rayons U.V.:

Les mesures sont effectuées dans les laboratoires d'essai de ISO Italia. Les conditions environnementales peuvent modifier sensiblement les données relevées ($\pm 10\%$). Les éventuelles différences dans le relevé des données de modèles similaires sont dues à la production artisanale de certains éléments. Les données contenues dans le document présent se réfèrent à l'appareillage dans ses conditions originales; elles perdent toute validité en cas de modifications et substitutions avec des éléments ne présentant pas la marque ISO Italia.

Les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27



Bescheinigung der strahlen - abgabe

Es wird bescheinigt, daß dieser U.V.A. Strahlengerät UV-Strahlen abgibt:

Die Messungen werden in den Prüflabors der ISO Italia durchgeführt. Umweltbedingungen modifizieren die erhobenen Daten spürbar ($\pm 10\%$). Eventuelle Abweichungen in den Datenerhebungen von gleichen Modellen sind der handwerklichen Produktion einiger Komponenten geschuldet. Die Daten des vorliegenden Dokumentes beziehen sich auf die Apparatur im Originalzustand; sie verlieren ihre Gültigkeit im Fall von Mißbrauch und Austausch von Elementen mit solchen, die kein ISO Italia-Siegel haben.

Die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27



Certificado de emission de rayos

Se atestigua que este aparato de radiaciones U.V.A. emite radiaciones U.V.:

La medición se efectúa en los laboratorios de pruebas de ISO Italia. Las condiciones ambientales modifican sensiblemente los datos registrados ($\pm 10\%$). Las eventuales diferencias al registrar los datos de modelos semejantes se deben a la producción artesanal de algunos componentes. Los datos que el presente documento contiene se refieren al aparato en sus condiciones originales, pierden validez si se maneja indebidamente o se substituyen partes del mismo con elementos que tengan un sello diverso del de ISO Italia.

Los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27



MPI 17045

Regole per una Corretta Seduta Abbronzante

Le radiazioni ultraviolette del sole o di un apparecchio abbronzante possono danneggiare la pelle e gli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni in relazione alla sensibilità della pelle dell'individuo. Un'esposizione eccessiva, pertanto, può portare a scottature della pelle. Le esposizioni alle radiazioni del sole o di un apparecchio abbronzante, ripetute eccessivamente, possono aumentare il rischio di neoplasie ed invecchiamento prematuro della pelle. Gli occhi non protetti possono subire infiammazioni.

Per la tranquillità di effettuare sedute abbronzanti senza incorrere in rischi particolari sono da tenere seriamente in considerazione le seguenti precauzioni ed indicazioni:

- Rispettare scrupolosamente i tempi di esposizione stabiliti dal personale specializzato del centro.
- Si consiglia di alternare almeno un giorno fra una seduta e l'altra (è consigliato esporsi non più di due volte alla settimana) rispettando le indicazioni del personale specializzato del centro.
- Usare sempre gli appositi occhialini di protezione in dotazione. In ogni caso non sottoporsi assolutamente al trattamento abbronzante ad occhi aperti o con lenti a contatto.
- Prima di ogni esposizione la pelle deve essere ben pulita, senza trucco, prodotti cosmetici, profumi e deodoranti. Dopo la seduta si consiglia una crema idratante dopo sole.
- È sconsigliato l'utilizzo del solarium a clienti che effettuano trattamenti dermatologici e trattamenti depilanti al laser.
- L'uso non è consigliato a soggetti con età inferiore ai 16 anni.
- Durante una terapia con farmaci particolari, quali ad esempio, antibiotici od antinfiammatori, si consiglia la sospensione delle sedute abbronzanti, al fine di evitare reazioni di sensibilizzazione generate dall'uso dei medicinali. Se vi è una cura medica in corso attendere il termine. In ogni caso si consiglia di consultare il proprio medico curante. In caso di gravidanza consultare il medico. Si sconsiglia fortemente l'uso del solarium in caso di gravidanza.
- Richiedere e pretendere dal personale addetto la consultazione e la conoscenza dell'apposito manuale d'uso al seguito di ogni attrezzatura ISO ITALIA, perché nessun risarcimento e/o responsabilità può essere riconducibile alla ISO ITALIA per una non corretta utilizzazione e/o manutenzione delle attrezzature dalla stessa prodotte.
- Usando il solarium nei tempi e nei modi prescritti si può ottenere un'ottima abbronzatura e mantenerla per lungo tempo, sia a breve che a lunga scadenza. Evitare gli eccessi: ricordarsi che il solarium ha sul corpo umano gli stessi effetti del sole: poco alla volta fa bene, troppo può far male.
- Per una abbronzatura omogenea evitare le posizioni fisse o le attitudini statiche; è consigliato di muoversi e spostarsi affinché l'angolo di ricezione dei raggi non sia sempre identico e i tempi di esposizione siano uniformemente distribuiti su tutto il corpo.
- L'abbronzatura potrà risultare non perfettamente uniforme su soggetti con problemi di circolazione del sangue o che effettuano esposizioni durante il ciclo mestruale.
- Altri effetti del solarium: miglioramento del trattamento di affezioni cutanee, acne, impurità della pelle, psoriasi (in medicina è usato nella PUVA-terapia), funghi della pelle, reumatismi, artriti, artrosi, pulizia dell'epidermide, aumento dello spessore dell'epidermide, aumento della resistenza alle malattie infettive e da raffreddamento, aumento della formazione della vitamina D nel sangue (funzione antirachitica), tonificazione muscolare, relax psicofisico.
- NON USARE L'APPARECCHIO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEI FILTRI (LUCE BIANCA PROVENIENTE DALLE LAMPADE) E DI DIFETTI DEI TEMPI DEL CONTROLLO DEI TEMPI DI ESPOSIZIONE.
- Si consiglia visita dermatologica per determinazione fototipo.



PIÙ SICURO
DEL SOLE

INDUSTRIA SOLARIUM S.p.A.
ATTREZZATURE PER IL SOLARIUM

Via delle Sette, 4/A - Milano, 20122 - S. STIRO DI LIVENZA (VE) - ITALY
Tel. +39 0421 311720 - Fax +39 0421 311722 - e-mail: contact@isitalia.com

www.isoitalia.com

Certificato di emissione raggi

Ray emission certificate

Certificat d'émission des rayons

Bescheinigung der Strahlen - Abgabe

Certificado de emision de rayos



The tanning equipment emits U.V. rays types:

L'apparecchiatura abbronzante emette raggi U.V. del tipo:

L'appareil de bronzage émet de rayons U.V. de type:

Das Braunungsgerät gibt U.V. - Strahlen folgenden Typ ab:

El aparato bronceador emite rayos U.V. de types:

Sunbeds and tanning booth - Letti o cabine
Lits ou cabines - Betten oder Kabinen - Camillas o
cabinas - Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara

Mod. MATRIX V28 A

N. 100713

Date 05/06/2012

Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara

UVA W/m² **0.1929**
UVB W/m² **0.0936**
UVA+B W/m² **0.2927**
UV Type: **2**

Hands - Mani - Mains - Hände - Manos

UVA W/m²
UVB W/m²
UVA+B W/m²
UV Type: -

Body - Corpo - Corps - Körper - Cuerpo

UVA W/m² **0.0967**
UVB W/m² **0.1664**
UVA+B W/m² **0.2684**
UV Type: **2**

Total - Totale - Total - Gesamt - Todo

UVA W/m² **0.1928**
UVB W/m² **0.1052**
UVA+B W/m² **0.2980**
UV Type: **2**

I.SO ITALIA s.r.l.

Technical Department/Direzione Tecnica

I.S.O ITALIA s.r.l.

General Management/Direzione Generale

Please note: the values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27.
By UVA, we mean effective radiation between 320-400 nm.
By UVB, we mean effective radiation between 250-320 nm.

Nota: i valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27.
Per UVA si intende la radiazione efficace tra 320-400 nm.
Per UVB si intende la radiazione efficace tra 250-320 nm.

Note: les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27.
Par UVA, l'on entend la radiation efficace entre 320-400 nm.
Par UVB, l'on entend la radiation efficace entre 250-320 nm.

Anmerkung: die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27 formuliert wird.

Mit UVA versteht man die effektive Strahlung zwischen 320-400 nm.
Mit UVB versteht man die effektive Strahlung zwischen 250-320 nm.

Nota: los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27.
Para rayos UVA se entiende la radiación eficaz entre 320-400 nm.
Para rayos UVB se entiende la radiación eficaz entre 250-320 nm.

MPI 17048/3

Più sicuro del sole

NB. Il presente documento ha validità solamente se
accompagnato dalla dichiarazione di adeguamento debitamente compilata

INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA

I.S.O Italia s.r.l. - Via G. di Vittorio, 30 - 30029 S. STINO DI LIVENZA (VE) - ITALY
Tel. (0039) 0421 311700 r.a. - Fax (0039) 0421 311702 - e-mail: contact@isitalia.com - www.isitalia.com

